

Suture Alan Lact Fast



Ouverture facile

1 Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué



2 Abaisser la partie déchirée jusqu'à ce que l'aiguille soit visible



3 Utiliser le porte-aiguille et retirer la suture



ALAN LACT FAST

- Suture chirurgicale stérile
- Résorbable
- Multifilament
- Composé de : 90 % Glycolide, 10 % Lactide : Polyglactin 910
- Coloré violet avec D & C Violet No.2
- Recouvert d'un revêtement de Polyglactin 370 et stéarate de calcium
- Perte totale de résistance après 10 à 14 jours
- Absorption totale après +/- 42 jours
- Aiguille en acier inoxydable enduite de silicone. Facilite le passage sans endommager le tissu

Remarques:

Dispositif médical de classe III à usage unique


Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C

Dimensions des boîtes : 62x130x62 mm

Dimensions

| Référence | Profil de l'aiguille | Description de l'aiguille | Longueur de l'aiguille (mm) | Taille | Longueur du fil (cm) |
|-----------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|
| SUTLF3 | 3/8 | Tranchant inversé | 19 | 3/0 | 70 |
| SUTLF4 | 3/8 | Tranchant inversé | 19 | 4/0 | 70 |
| SUTLF5 | 1/2 | Tranchant inversé | 16 | 5/0 | 70 |

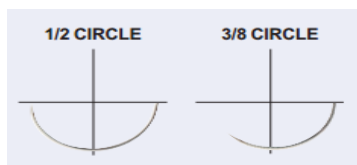

Conditionnement

| Pièces/Boîte | Boîtes/Carton |
|--------------|---------------|
| 12 | 216 |

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE



ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium

Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

www.alan.be – info@alan.be

Version 08/2018